



Bonny

Hubwanne - Einfach praktisch

- + elektrisch höhenverstellbar von 650 bis 1050 mm
- + Grohe-Thermostat mit 38°C-Sperre
- + bequeme Armauflage und Griffe
- + mit Patientenhilfen unterfahrbar
- + benötigt keine Wand- oder Bodenbefestigung

Fürsorge ist eine Berufung

Von der Herstellung, Planung bis zur Installation und dem Service sind wir für Sie da




Bequeme Badeposition

Durch den abgeschrägten Rückenteil und die seitlich angeordneten Armauflagen können Sie eine bequeme Badeposition einnehmen. Für mehr Halt gibt es auf beiden Seiten Handgriffe und die Möglichkeit einen optionalen Wannverkürzer einzusetzen.



Hubsystem

Die frei tragende, feuerverzinkte Hebemechanik der Wanne (ca. 650 mm – 1050 mm) gibt Pflegekräften die Möglichkeit eine rückschonende Arbeitshaltung einzunehmen. Durch die freie Unterfahrbarkeit sind Hilfsmittel wie Lifter vielfältig nutzbar.

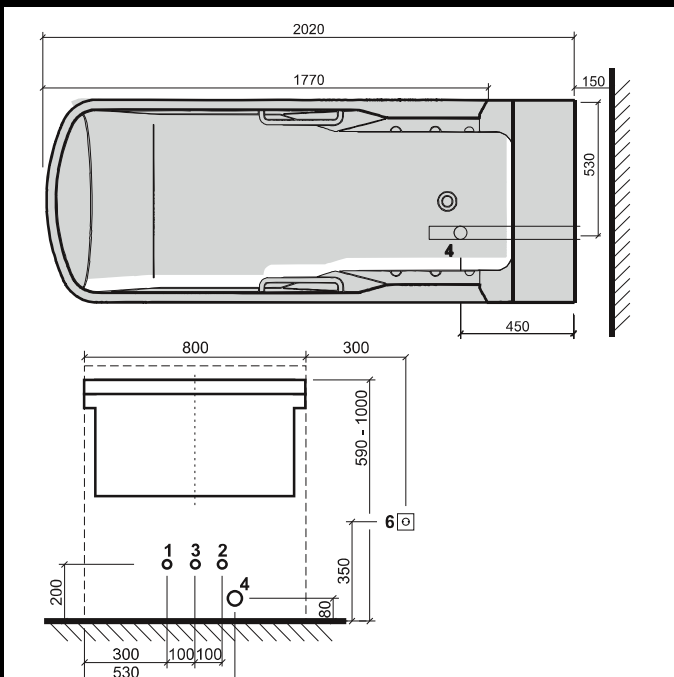

Bauseitige Anschlüsse – Sanitär – Elektro

1. Warmwasseranschluss $\frac{3}{4}$ Zoll, Innengewinde plattenbündig
2. Kaltwasseranschluss $\frac{3}{4}$ Zoll, Innengewinde plattenbündig
3. Zentrale Desinfektion $\frac{1}{2}$ Zoll, Innengewinde plattenbündig (falls vorhanden)
4. Abfluss DN 40, plattenbündig
5. Ablauf mit Geruchsverschluss DN 70, 40 mm vertieft eingebaut (Leistung 3,5 l/sec.)
6. Abzweigdose IP65, 230V/50 HZz 1,5 mm², Absicherung 10 A.

Bauseitige Schutzmaßnahmen

Vorabsperrung Kalt- und Warmwasser, allpoliger Ausschalter innerhalb des Raumes, Fi-Schutzschalter - Nenn-Fehlerstrom max. 30mA, Elektroinstallation nach den zur Zeit gültigen DIN/VDE Normen. Potenzialausgleich nach DIN VDE 0107

Web: www.mk-erlen.de - E-Mail: info@mk-erlen.de Gerichtsstand:

Erlen GmbH

Carl-Still-Straße 22 - 45659 Recklinghausen

Tel: + 49 (0) 23 61 / 92 92 0 - Fax: +49 (0) 23 61 / 92 92 92
Amtsgericht: Recklinghausen - USt.-IdNR.: DE 126 351 261

MK Bad & Pflegesysteme GmbH

Carl-Still-Straße 22 - 45659 Recklinhausen

Tel: + 49 (0) 80 51 / 74 62 - Fax: +49 (0) 80 51 / 97 02 35
Amtsgericht: Recklinghausen - USt.-IdNR.: DE 126 351 261